

نود أن نهنئك على شراء نظام اتصالات سماعات البلوتوث CM-BT2 الجديد.
لقد اشتريت جهازًا إلكترونيًا متطورًا وموثوقًا للغاية. يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية. وهي تشرح كيفية تشغيل الجهاز ووصف جميع خيارات ووظائف النظام.

المحتويات

معلومات عامة

- 2 تقنية راديو البلوتوث
- 2 محتويات العبوة

التشغيل لأول مرة

- 3 تفاصيل عناصر التشغيل
- 5 شحن "CM-BT2"
- 5 شحن "CM-BT2" بمصدر الطاقة
- 5 شحن "CM-BT2" عن طريق منفذ USB على جهاز حاسوب
- 6 زمن تشغيل "CM-BT2"
- 7 تشغيل/إطفاء "CM-BT2"
- 7 اقتران "CM-BT2" مع هاتف متوافق
- 8 فصل "CM-BT2" من الهاتف
- 9 إعادة توصيل "CM-BT2" مع الهاتف

التشغيل الأساسي

- 9 إجراء المكالمات والإجابة عليها
- 9 استخدام "CM-BT2" كسماعات رأس موسيقية مع الهاتف
- 10 تعديل صوت الاستماع
- 11 توصيل "CM-BT2" بحاسوب متوافق
- 11 قفل أمان حلقة العنق

ملحق

- 12 ملاحظات متعلقة بالسلامة
- 12 الصيانة والعناية
- 12 الملاحظات البيئية/التخلص منها
- 13 الضمان
- 14 المواصفات

تقنية راديو البلوتوث

البلوتوث هي تقنية لاسلكية تجعل من الممكن توصيل أجهزة الاتصالات المتوافقة معًا بدون أسلاك. لإنشاء اتصال عبر البلوتوث والمحافظة عليه، ليس من الضروري وجود خط رؤية واضح بين الأجهزة (مثل الهاتف وسماعة الرأس).

ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز المسافة بين الأجهزة عشرة أمتار. قد تتسبب المعوقات - مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى - في حدوث تداخل في الاتصال، مما قد يقلل من جودة الاستقبال.

تتوافق سماعة الرأس «CM-BT2» مع الإصدار 5 من مواصفات البلوتوث وتدعم الملفات الشخصية التالية:

- سماعة رأس (HSP) مع مخرج التحدث/الموسيقى
- الهاتف اللاسلكي بدون استخدام اليدين (HFP)
- سماعات الاستريو للتوزيع الصوتي المتقدم (A2DP)
- التحكم عن بعد بالصوت/الفيديو (AVRCP)

يرجى الاتصال بمصنعي أجهزتك الأخرى لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع «CM-BT2». قد يكون استخدام تقنية راديو البلوتوث مقيّدًا في بعض المناطق. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

محتويات العبوة

يرجى التحقق من تضمين جميع العناصر التالية:

- سماعة رأس «CM-BT2» مع التليلوب


- كيبيل شحن USB

- مصدر طاقة

- تعليمات التشغيل

- بطاقة ضمان

يرجى الاتصال بالتاجر المتخصص أو الشركة المصنعة مباشرة، في حالة فقدان أي من العناصر.

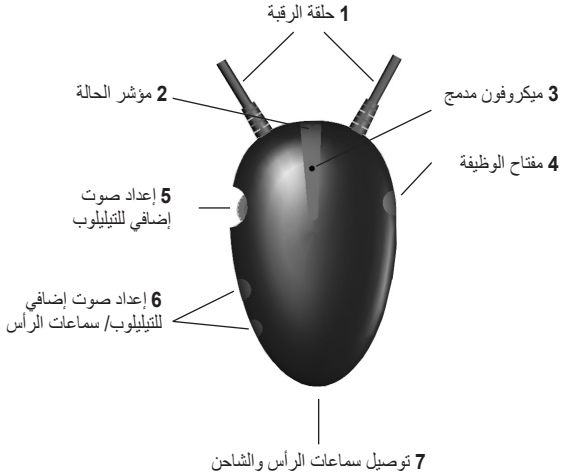

- 1 حلقة الرقبة
- 2 مؤشر الحالة
 - الضوء الأحمر مرئي
 - يومض الضوء الأحمر ببطء
 - يومض الضوء الأزرق/الأحمر بالتناوب
 - الضوء الأزرق يومض كل 3 ثواني
 - الضوء الأزرق مرئي لثانية واحدة
 - كل 5 ثانية
 - ← «CM-BT2» مغلق
 - ← تحذير: البطارية منخفضة
 - ← وضع الاقتران
 - ← محاولة اتصال
 - ← تم التوصيل ب الجهاز
- 3 ميكروفون مدمج
- 4 مفتاح الوظيفة
 - تشغيل/ إطفاء "CM-BT2"
 - مفتاح الرد على/ إنهاء المكالمة
 - مفتاح الاقتران
- 5 إعداد مستوى صوت إضافي لحلقة الرقبة

يمكن زيادة مستوى صوت حلقة العنق بشكل مستقل باستخدام قرص التحكم هذا.
- 6 إعداد الصوت لحلقة العنق/سماعات الرأس

يمكن تعديل مستوى صوت حلقة العنق/سماعات الرأس باستخدام كلا هذين المفتاحين
- 7 توصيل سماعات الرأس والشاحن

يمكن استخدام هذا المقيس بمقاس 3 ملم لتوصيل سماعات الرأس أو الشحن CM-BT2 مع كابل الشحن.

شحن "CM-BT2"

يحتوي «CM-BT2» على بطارية بوليمر ليثيوم مدمجة وقابلة لإعادة الشحن. قبل الاستخدام الأولي، يوصى بشحن «CM-BT2» بالكامل.

يرجى ملاحظة أن «CM-BT2» لا يمكن استخدامها أثناء شحنها



شحن "CM-BT2" بمصدر الطاقة

قم بتوصيل كابل شحن USB المغلق بـ «CM-BT2» باستخدام توصيل الشاحن 7. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل شحن USB بمزود الطاقة المرفق. أدخل مصدر الطاقة في مقبس قابس توصيل 230 فولت. يتم شحن «CM-BT2» بالكامل عند تلاشي مؤشر الحالة.



شحن «CM-BT2» عبر منفذ USB على جهاز كمبيوتر

قم بتوصيل كابل شحن USB المغلق بـ «CM-BT2» باستخدام توصيل الشاحن 7. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل شحن USB بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم شحن «CM-BT2» بالكامل عند تلاشي مؤشر الحالة.

زمن تشغيل CM-BT2

في الاستخدام العادي، يكون لدى «CM-BT2» ثلاث ساعات من وقت التحدث وما يصل إلى 120 ساعة من الوقت الاحتياطي.
عند تفريغ البطارية، يومض مؤشر الحالة الحمراء ببطء ويحتاج «CM-BT2» إلى الشحن

ملاحظة:

تعتمد مدة التشغيل على الطريقة التي يتم بها استخدام «CM-BT2» وعلى مدى علو مستوى المحدد. سيستغرق الشحن وقتاً أطول إذا لم يتم استخدام «CM-BT2» لفترة طويلة وتفريغ البطارية نفسها.

تشغيل/ إطفاء "CM-BT2"

اضغط على مفتاح الوظيفة 4 لحوالي 3 ثوان حتى يضيء مؤشر الحالة الأزرق. تصدر سماعات التليلوب/الرأس إشارة مسموعة للإشارة إلى أن «CM-BT2» قد تم تشغيله الآن. إذا كان هناك جهاز مقترن في مكان قريب، فسوف يتصل «CM-BT2» تلقائيًا بهذا الجهاز.

اضغط على مفتاح الوظيفة 4 لحوالي 3 ثوان حتى يضيء مؤشر الحالة الأحمر. تصدر سماعات التليلوب/الرأس إشارة مسموعة للإشارة إلى أن «CM-BT2» قد تم إطفائه الآن.




إقتران "CM-BT2" مع هاتف متوافق

قبل أن تتمكن من استخدام «CM-BT2» مع الهاتف، يجب إضافته إلى قائمة الأجهزة في الهاتف. للقيام بذلك، اتبع التعليمات الواردة في دليل تشغيل الهاتف التي تشرح كيفية تنشيط البلوتوث.

1. تشغيل الهاتف.

2. اضغط على مفتاح الوظيفة 4 على «CM-BT2» لحوالي 6 ثوان حتى يومض مؤشر الحالة الأزرق والأحمر بالتناوب. يبقى "CM- BT2" في وضع الاقتران لمدة دقيقتين.

3. قم بتنشيط وظيفة البلوتوث على الهاتف والبدء في البحث عن أجهزة البلوتوث. يمكن العثور على تعليمات حول كيفية القيام بذلك في تعليمات التشغيل للهاتف الخاص بك.

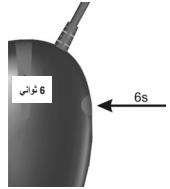

4. اختر «CM-BT2» من قائمة الأجهزة الموجودة.

إذا لزم الأمر، أدخل كلمة السر «0000» لإقران «CM-BT2» والهاتف وإنشاء اتصال.

5. إذا كان الاقتران ناجحًا، فإن مؤشر الحالة الأزرق على «CM-BT2» يومض أربع مرات بسرعة والتليلوب وسماعات الرأس تصدر إشارة مسموعة.

بالنسبة لبعض الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال يدويًا بمجرد تسجيل سماعة الرأس. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع دليل تشغيل هاتفك. عليك فقط تسجيل «CM-BT2» على الهاتف مرة واحدة. بعد ذلك، سيتم التعرف على «CM-BT2» تلقائيًا.

يتم توصيل «CM-BT2» بالهاتف عندما يضيء مؤشر الحالة الأزرق لمدة ثانية واحدة كل 5 ثانية. سيظهر «CM-BT2» الآن في قائمة هاتفك الذي يعرض جميع أجهزة البلوتوث المقترنة حاليًا بالهاتف.

فصل "CM-BT2" من الهاتف

قم بإحدى الخطوات التالية لإنهاء الاتصال بين «CM-BT2» والهاتف (على سبيل المثال عندما تريد توصيل جهاز بلوتوث آخر بالهاتف):

- إطفاء "CM-BT2"
 - إنهاء الاتصال بـ «CM-BT2» في قائمة بلوتوث الهاتف.
 - حرك «CM-BT2» إلى موقع يبعد أكثر من 10 أمتار عن الهاتف.
- يرجى ملاحظة: ليس عليك حذف «CM-BT2» من قائمة الهاتف للأجهزة المتوافقة لإنهاء الاتصال.

إعادة ربط «CM-BT2» بالهاتف

يوميض مؤشر الحالة الزرقاء لمدة ثانية واحدة كل 3 ثانية بمجرد انفصال «CM-BT2» عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا كانت المسافة بينهما كبيرة جدًا.

بمجرد أن يصبح «CM-BT2» والهاتف في نطاق بعضهما البعض مرة أخرى، يعيد «CM-BT2» الاتصال تلقائيًا.

يوميض مؤشر الحالة الزرقاء لثانية واحدة كل 5 ثواني وتصدر سماعات التلويب/الرأس إشارة مسموعة عند إعادة إنشاء الاتصال.

التشغيل الأساسي

إجراء المكالمات والإجابة عليها

لإجراء مكالمة، تأكد من أن الهاتف متصل بـ «CM-BT2» واجر المكالمة كالمعتاد.

لإجراء مكالمة، اضغط على مفتاح الدالة 4 لفترة وجيزة.


لإنهاء المكالمة، استخدم الأزرار الموجودة على الهاتف أو اضغط على مفتاح الوظيفة على «CM-BT2».

استخدام «CM-BT2» كسماعات موسيقية مع الهاتف


إذا كان هناك مشغل موسيقى مدمج في هاتفك، فيمكنك أيضًا استخدام «CM-BT2» للاستماع إلى الموسيقى. بمجرد اكتشاف مكالمة واردة، سيتم مقاطعة الموسيقى، وسيتم رنين «CM-BT2» ويمكنك الضغط على مفتاح الوظيفة 4 للرد على المكالمة. ستستمر الموسيقى في التشغيل بمجرد إنهاء المكالمة.

تعديل صوت الاستماع

اضغط على زر «+» على مفاتيح الصوت 6 بشكل متكرر لزيادة مستوى الصوت.
تنبعث من حلقة العنق/سماعات الرأس إشارة مسموعة عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.
اضغط على زر «-» على مفاتيح الصوت 6 بشكل متكرر لتقليل مستوى الصوت.
تنبعث من حلقة العنق/سماعات الرأس إشارة مسموعة عند الوصول إلى مستوى الصوت الأدنى.

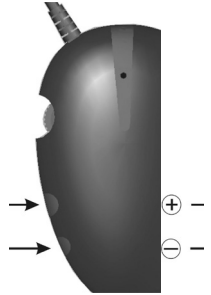

يحتوي «CM-BT2» على إعداد مستوى إضافي 5 لزيادة مستوى صوت حلقة العنق بشكل مستقل. قم بتشغيل قرص التحكم على إعداد مستوى الصوت الإضافي لضبط مستوى الصوت.
يعمل إعداد مستوى الصوت الإضافي فقط مع حلقة العنق وليس له أي تأثير على مخرج سماعات الرأس.

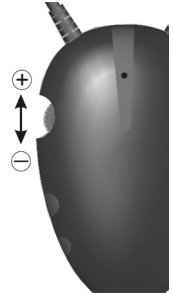

قبل استخدام «CM-BT2» دائما تأكد من أن مستوى الصوت قد تم تحديده لمستوى مريح لمنع أي أذى يمكن أن يسببه مستوى الصوت الشديد. اضبط مستوى الصوت دائمًا على مستوى منخفض.



توصيل "CM-BT2" بحاسوب متوافق

1. شغل جهاز الكمبيوتر وتأكد من أن البلوتوث الأجهزة الموجودة على الكمبيوتر قم تم تفعيلها. شغل "CM-BT2".

2. اضغط مفتاح الوظيفة 4 على «CM-BT2» لحوالي 6 ثواني حتى يومض مؤشر الحالة باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب. يبقى "CM-BT2" في وضع الاقتران لدقيقتين.


3. قم بتشغيل برنامج بلوتوث على الكمبيوتر. اتبع تعليمات لتوصيل "CM-BT2".

4. اختر «CM-BT2» من قائمة الأجهزة الموجودة. إذا لزم الأمر، أدخل كلمة السر «0000» لإقران «CM-BT2» و الهاتف وإنشاء اتصال.

5. إذا كان الاقتران ناجحًا، فإن مؤشر الحالة الأزرق على «CM-BT2» يومض أربع مرات بسرعة وينبعث من التلويح وسماعات الرأس إشارة مسموعة.

نأسف لأننا غير قادرين على توفير الدعم الهاتفي لأي مشاكل قد تواجهها عند تشغيل هذا الجهاز بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

قفل أمان حلقة العنق

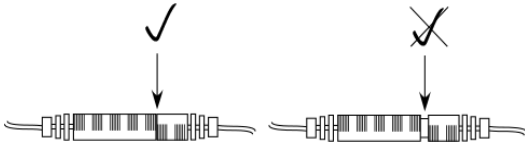

يرجى التأكد من إغلاق حلقة العنق بأمان تمامًا للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

ملاحظات متعلقة بالسلامة

تم بناء «CM-BT2» باستخدام أحدث التقنيات ووفقاً لمعايير الأمان المعترف بها.

يرجى ملاحظة تعليمات السلامة التالية:

- لا تعرض الجهاز أبداً لما يلي:
 - مصادر الحرارة
 - أشعة الشمس المباشرة
 - الرطوبة/الببليل
- حماية الجهاز من ملامسة الماء والغبار والسوائل القاسية والبخار.
- قم فقط بتوصيل سلك الاتصال بالمقبس المقابل.
- قم بتوصيل الملحقات المعتمدة فقط.
- لا يسمح بأي تغييرات في نظام الاتصالات، سواء كانت تقنية أم غير تقنية.
- يحتوي نظام الاتصالات «CM-BT2» على أجزاء صغيرة يمكن بلعها بسهولة ابق بعيداً عن تناول الأطفال دون سن 3 سنوات.

لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي أضرار أو إصابات شخصية ناجمة عن الاستخدام غير المناسب أو إساءة استخدام الجهاز.

الصيانة والعناية

لا تتطلب سماعة الرأس «CM-BT2» أي صيانة. إذا اتسخت الوحدة، ببساطة امسحها بقطعة قماش ناعمة ومبللة. لا تستخدم أبداً الكحوليات أو المخففات أو المذيبات العضوية الأخرى. لا تقم بإعداد «CM-BT2» في الأماكن التي ستعرض لأشعة الشمس الكاملة لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب حمايتها من الحرارة المفرطة والرطوبة والصدمات الميكانيكية الشديدة.

ملاحظة: هذا المنتج غير محمي من مياه الرش. لا تضع أي أوعية مملوءة بالماء، مثل مزهريات الزهور، أو أي شيء به لهب مفتوح، مثل شمعة مضاءة، على المنتج أو بالقرب منه.

التخلص من الوحدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة (المطبقة في بلدان الاتحاد الأوروبي
وبلدان أوروبية أخرى مع نظام مستقل للجمع). يشير الرمز الموجود على المنتج أو العبوة إلى أنه
لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج كفايات منزلية عادية ولكن يجب إعادته إلى نقطة تجميع لإعادة
تدوير الوحدات الكهربائية والإلكترونية.



أنت تحمي بيئة وصحة زملائك من خلال التخلص الصحيح من هذه المنتجات. تتعرض البيئة والصحة
للخطر بسبب التخلص اللامبالي. يساعد إعادة تدوير المواد على تقليل استهلاك المواد الخام. سنتلقى مزيداً
من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج من مجتمعك المحلي أو شركة التخلص المشتركة أو
التاجر المحلي.

البطارية القابلة لإعادة الشحن

يمكن أن تكون البطارية القابلة لإعادة الشحن التي تأتي مع الجهاز قابلة لإعادة التدوير. يرجى
التخلص من هذه البطارية القابلة لإعادة الشحن في أوعية مصممة لهذا الغرض أو إعادتها إلى
منفذ البيع بالتجزئة. التخلص من المنتج فقط من البطاريات التي تم تفريغها بالكامل ضمن الحماية
البيئية.



الضمان

هذا المنتج آمن جداً للعمل ويوفر خدمة موثوقة للغاية. في حالة حدوث عطل على الرغم من إنشاء الوحدة
وتشغيلها بشكل صحيح، يرجى الاتصال بالتاجر. يغطي هذا الضمان إصلاح المنتج وإعادته إليك مجاناً.
يوصى بإرسال المنتج في عبوته الأصلية، لذا احتفظ بالعبوة طوال فترة الضمان.
لا ينطبق الضمان على الضرر الناجم عن المناولة الخاطئة أو محاولات إصلاح الوحدة من قبل أشخاص غير
مصرح لهم بذلك (إتلاف الختم في الوحدة). لن يتم إجراء الإصلاحات تحت الضمان إلا إذا أعيدت بطاقة
الضمان المكتملة مصحوبة بنسخة من فاتورة التاجر/حتى الاستلام.
حدد دائماً رقم المنتج في أي حال.

بيانات فنية

اسم الموديل:	سماعة رأس CM-BT2
إصدار البلوتوث:	النسخة 5 من مواصفات البلوتوث
نطاقات التردد:	طيف 2.4Ghz ISM
قوة الإرسال القصوى:	قفز التردد 79 قناة
الوحدة:	< 10 mW
ملفات تعريف البلوتوث:	مفتاح تحول التردد الغاوسي (GFSK)
	سماعة رأس (HSP) مع مخرج التحدث/الموسيقى
	الهاتف اللاسلكي بدون استخدام اليدين (HFP)
	توزيع الصوت المتقدم (A2DP)
	سماعات ستيريو
	جهاز التحكم عن بعد بالصوت/الفيديو (AVRCP)
نطاق التشغيل	10 متر
وقت الانتظار:	حتى 120 ساعة
وقت التحدث:	حتى 3 ساعات للتيليلوب
	حتى 13 ساعة بسماعات الرأس
زمن الشحن	3 ساعات
الوزن:	49 غرام
الأبعاد:	48 مم × 76 مم

يمتثل هذا الجهاز لتوجيهات المفوضية الأوروبية CE التالية:

- توجيهه EC RoHS / 863 / 2015 + / 65 / 2011

- توجيهه EC WEEE / 19 / 2012

- توجيهه EC RED / 53 / 2014



يتم تأكيد الامتثال للتوجيهات المذكورة أعلاه بواسطة ختم CE على الجهاز.
ويمكن الاطلاع على إعلانات الامتثال CE على شبكة الإنترنت على العنوان التالي
www.humantechnik.com

المواصفات التقنية قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.